


RATIG

Galeri Antarmuka Aplikasi — Sistem Pemeriksaan Kelelahan Berbasis Waktu Reaksi

Android · Jetpack Compose · Material 3 · Offline-First


Dokumentasi UI

Alur Masuk

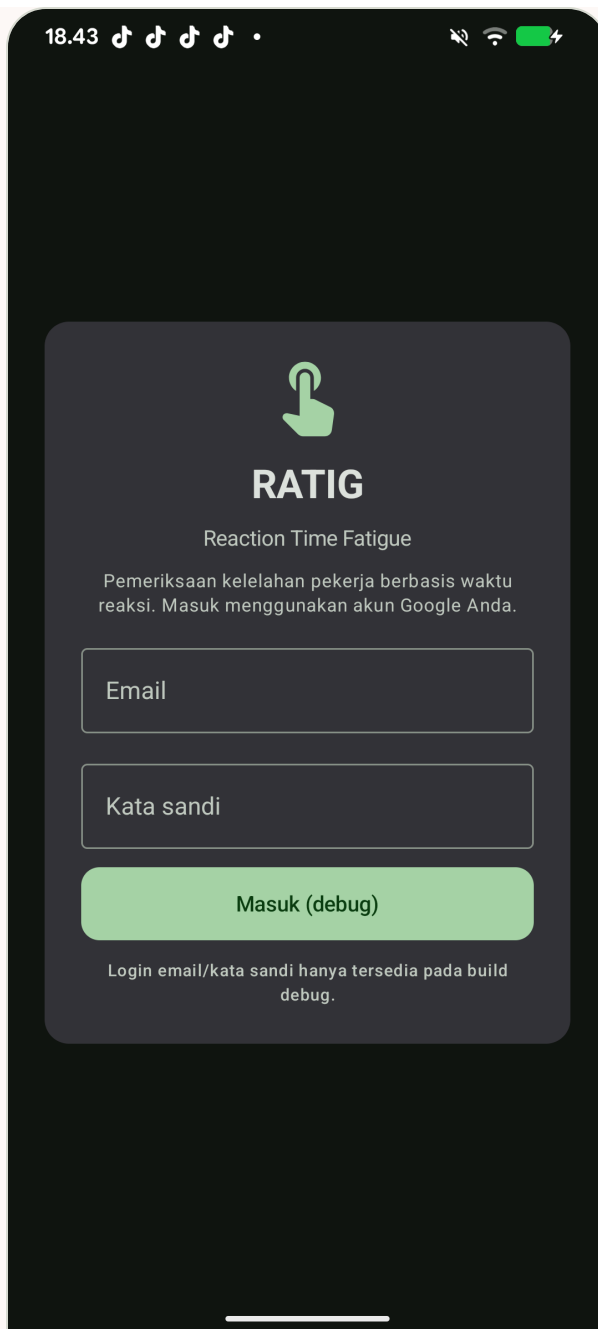

Layar Masuk

Masuk dengan akun Google. Pada build debug tersedia login email/kata sandi untuk pengujian.

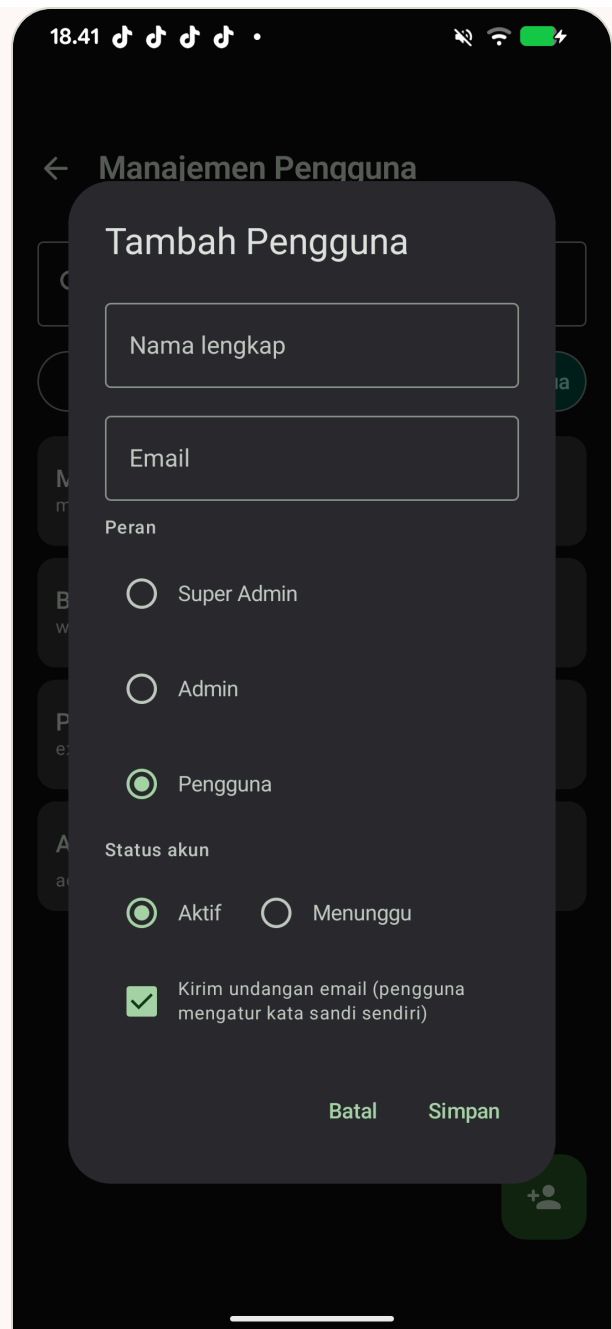


SUPER ADMIN

Tambah Pengguna

Super Admin/Admin menambahkan akun: nama, email, peran, status, dan opsi undangan email.


Super Admin

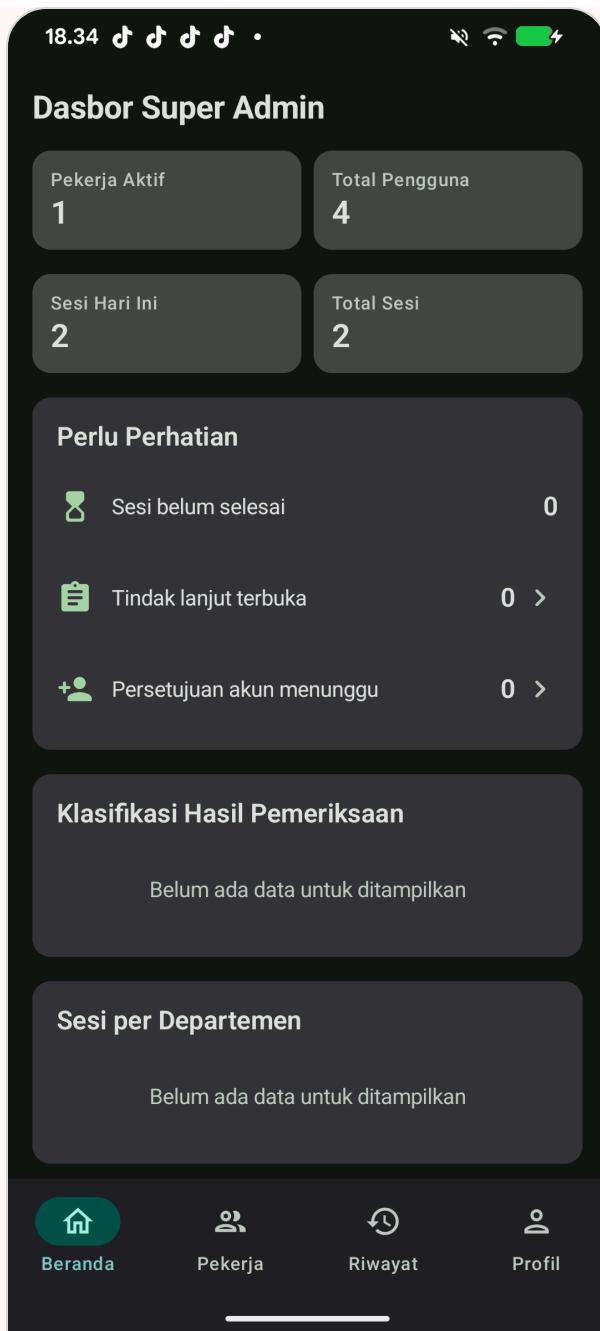

SUPER ADMIN


Dasbor Super Admin

Ringkasan pekerja aktif, total pengguna, sesi, dan hal yang perlu perhatian.

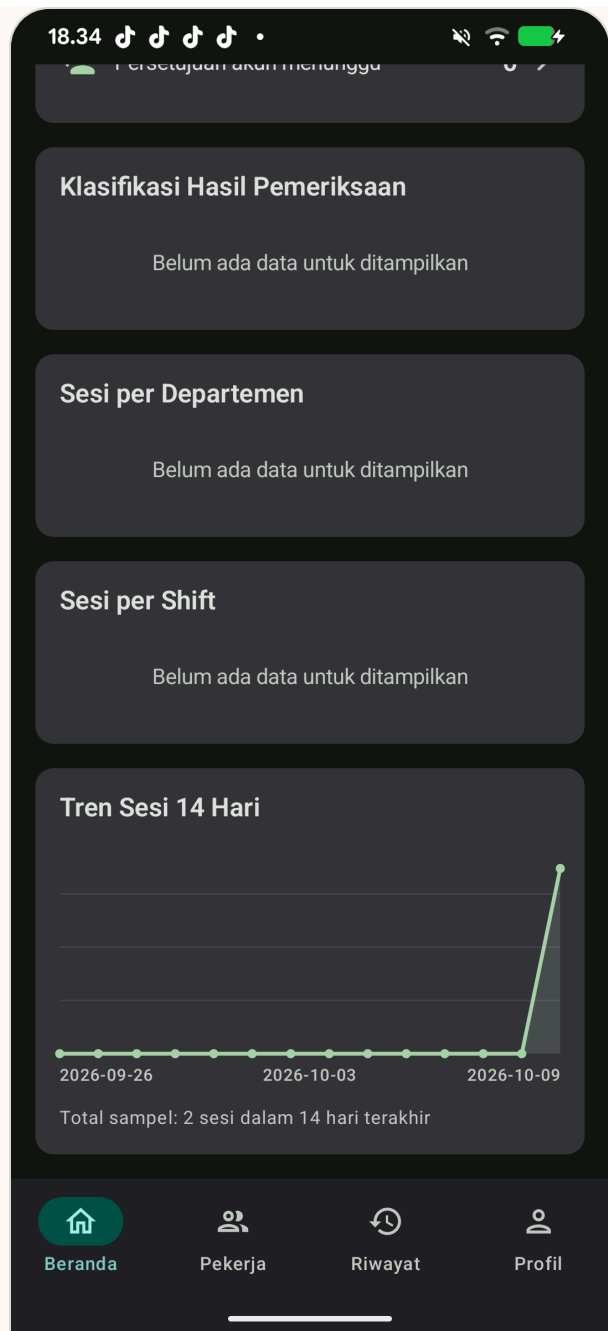


Dasbor (lanjutan)

Klasifikasi hasil, sesi per departemen, sesi per shift, dan tren harian.

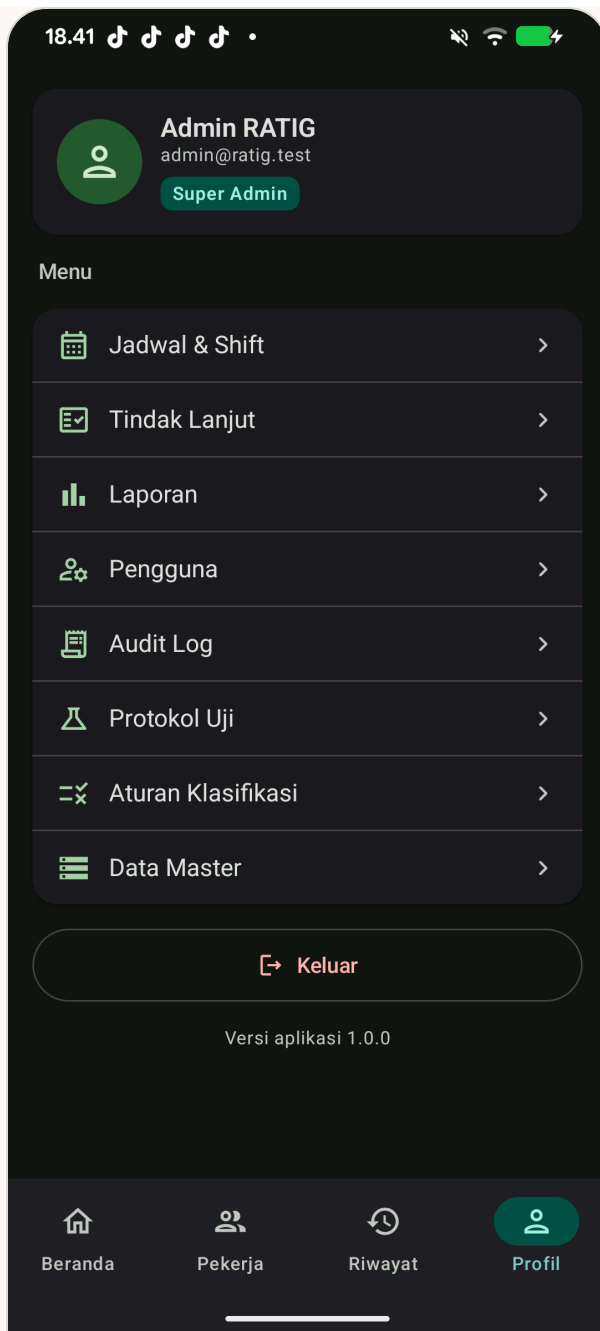

Profil Super Admin

Menu lengkap: Pengguna, Audit Log, Protokol, Aturan Klasifikasi, Data Master.

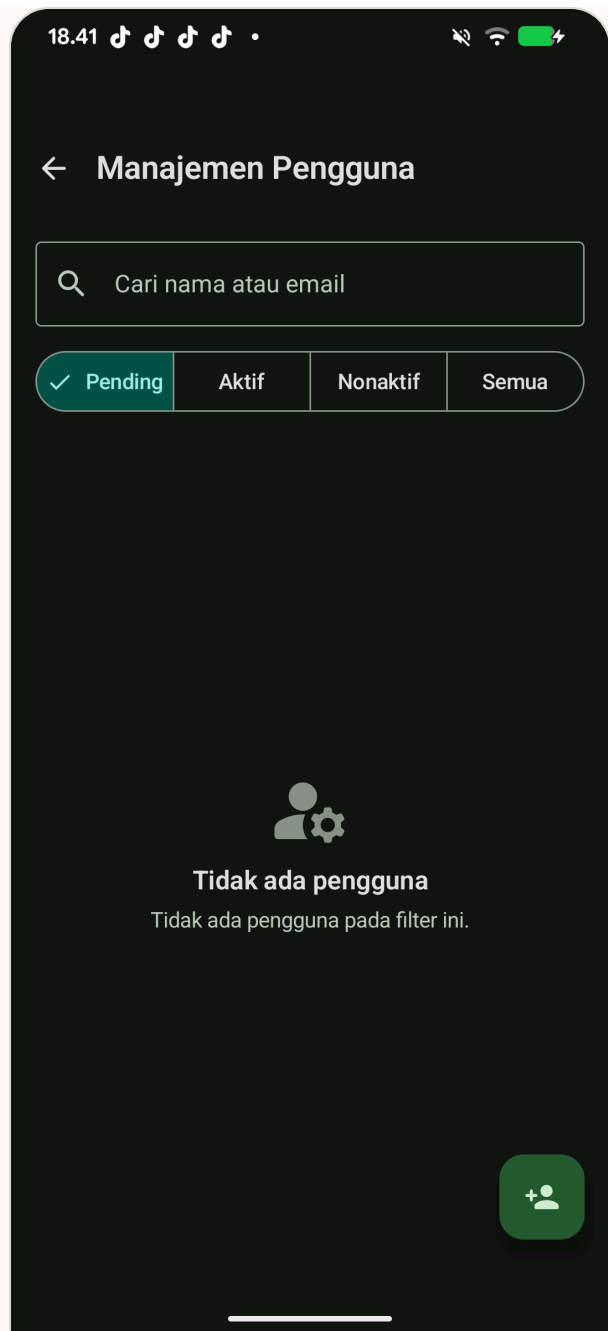

Manajemen Pengguna

Filter per status akun, pencarian, tombol (+) untuk menambah pengguna.

← Manajemen Pengguna

 Cari nama atau email

Pending

Aktif

Nonaktif

✓ Semua

Manajer Uji
mgmt@ratig.test

Admin

Aktif



Budi Test Pekerja
worker@ratig.test

Pengguna

Aktif



Petugas SATGAS
examiner@ratig.test

Admin

Aktif



Admin RATIG (Akun
Anda)
admin@ratig.test


Super Admin

Aktif




Daftar Pengguna (Semua)

Tiga peran ditampilkan jelas: Super Admin, Admin, dan Pengguna beserta status akunnya.

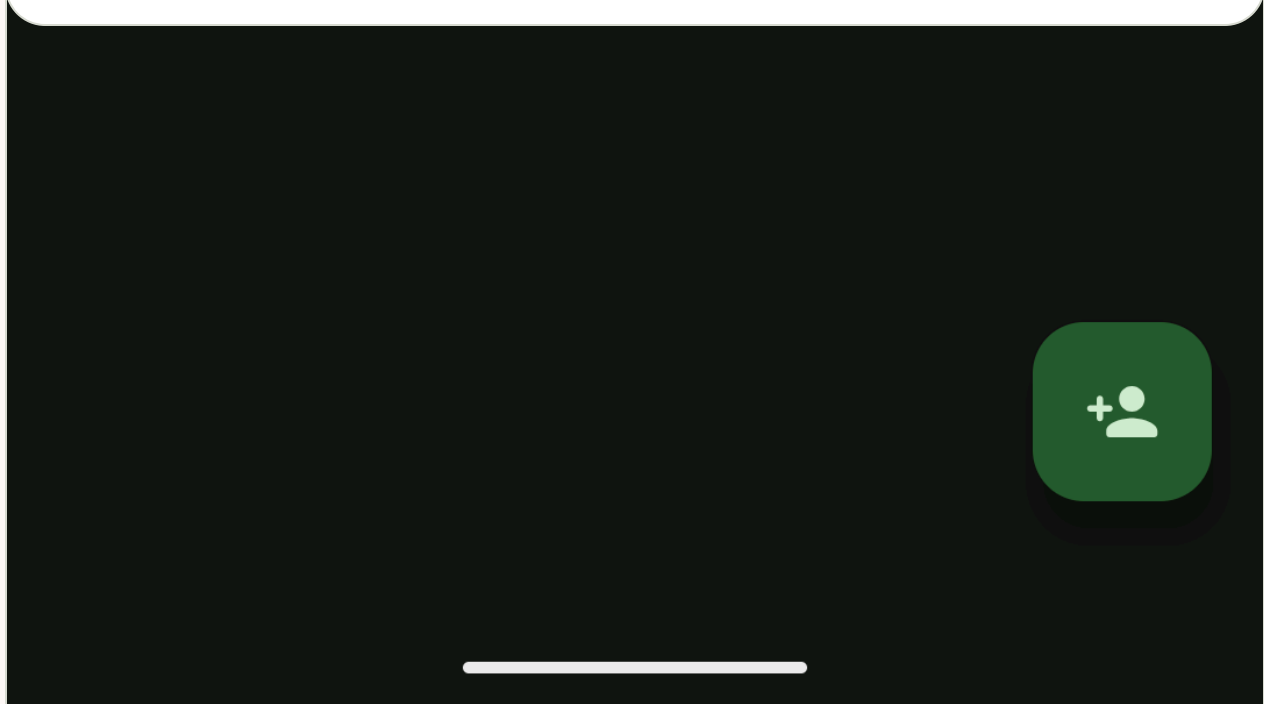


Operasional Pemeriksaan

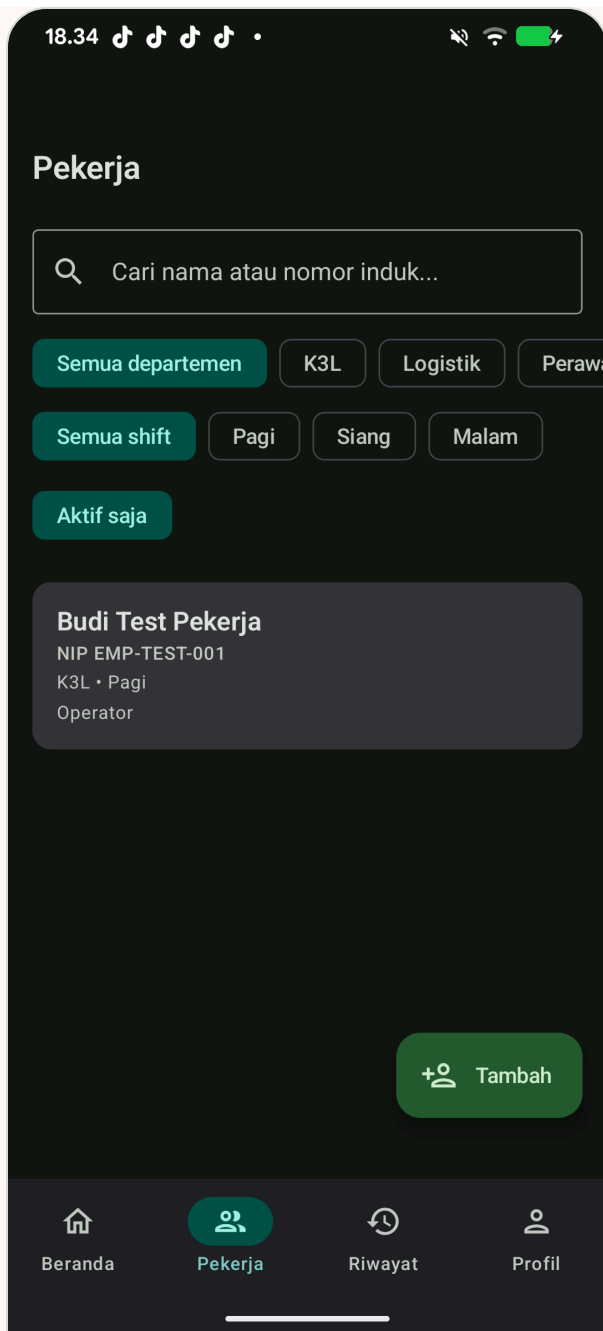

SEMUA PERAN


Daftar Pekerja

Pencarian, filter departemen/shift, dan status aktif pekerja.

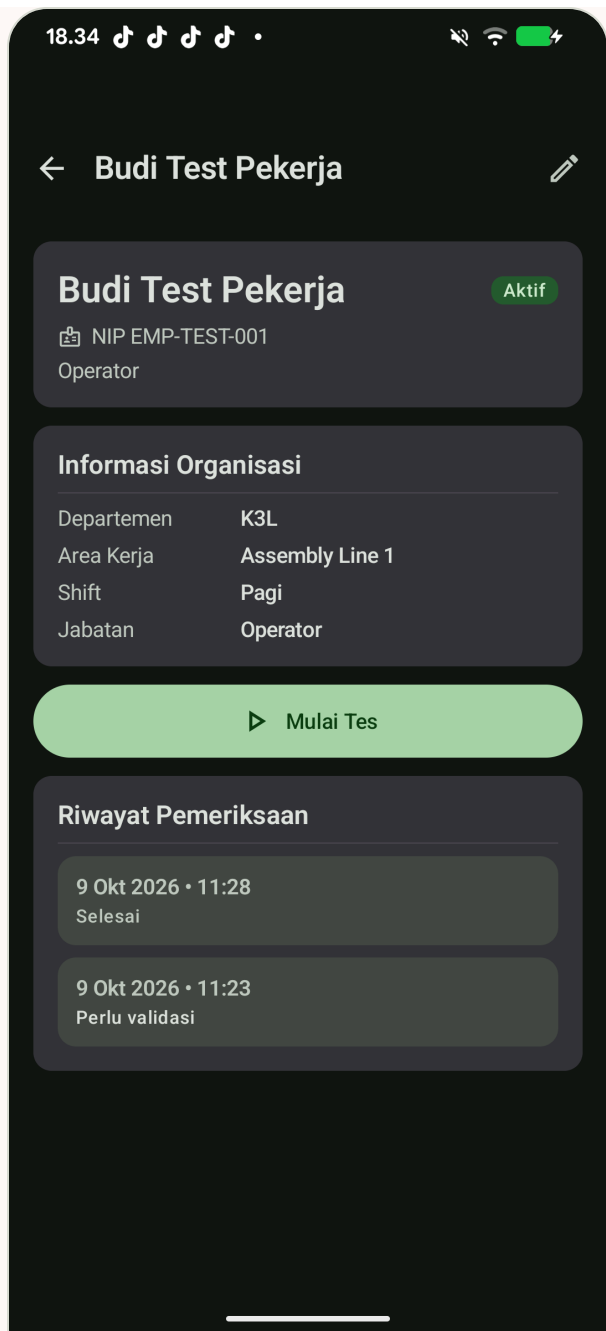


Detail Pekerja

Informasi organisasi, tombol Mulai Tes, dan riwayat pemeriksaan pekerja.

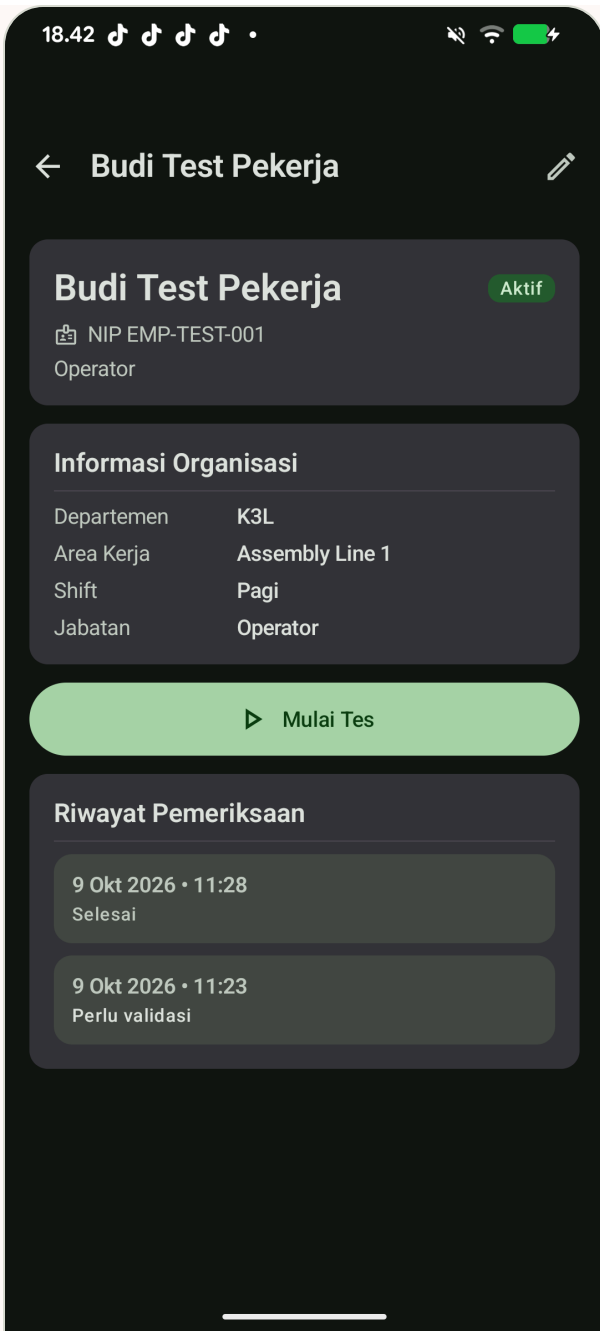

Detail Pekerja (lanjutan)

Riwayat sesi beserta status dan kategori hasil.

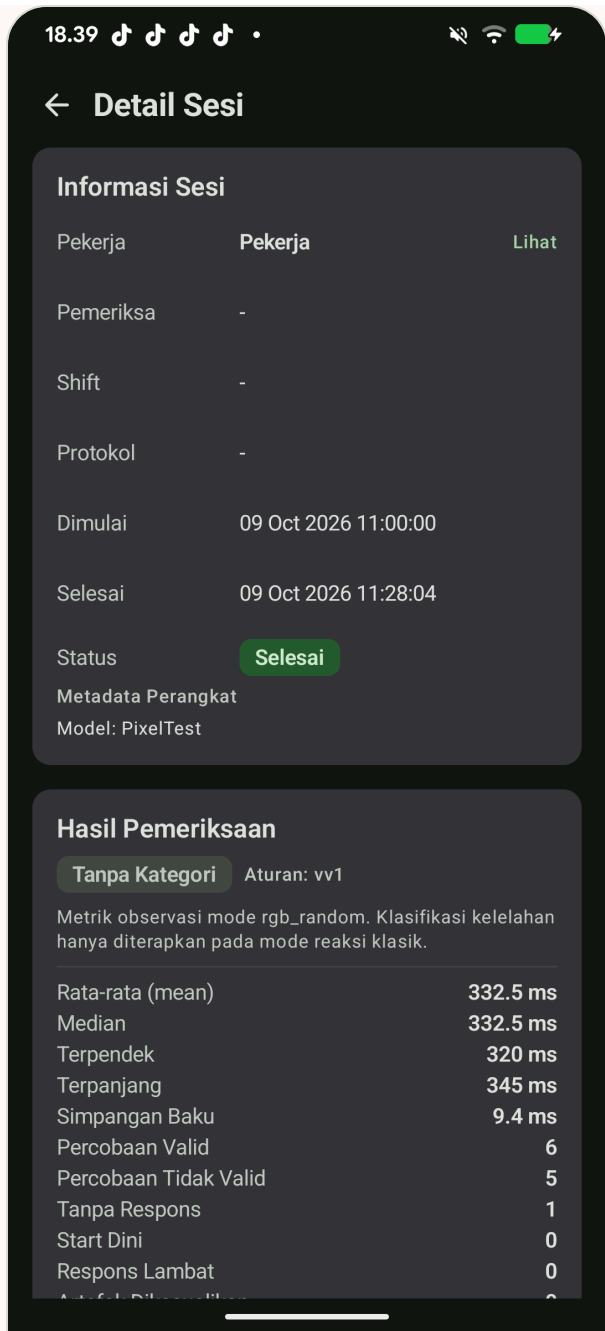

Detail Sesi

Informasi sesi, metadata perangkat, dan hasil pemeriksaan.

← Detail Sesi

Tanpa Kategori Aturan: vv1

Metrik observasi mode rgb_random. Klasifikasi kelelahan hanya diterapkan pada mode reaksi klasik.

Rata-rata (mean)	332.5 ms
Median	332.5 ms
Terpendek	320 ms
Terpanjang	345 ms
Simpangan Baku	9.4 ms
Percobaan Valid	6
Percobaan Tidak Valid	5
Tanpa Respons	1
Start Dini	0
Respons Lambat	0
Artefak Dikecualikan	0

Percobaan (11)

#1	 Valid	320 ms
#2	 Valid	325 ms
#3	 Valid	330 ms
#4	 Valid	335 ms

Rincian Percobaan (Trial)

Setiap percobaan dicatat: valid/tidak valid, waktu reaksi (ms), dan status respons.

#6	✓	Valid	345 ms
#7	?	Tidak Valid	280 ms
#8	?	Tidak Valid	1500 ms
#9	✓	Valid	-
#10	✓	Valid	-
#11	✗	Tidak Merespons	-

Analitik & Administrasi

18.39

Laporan

Periode

7 Hari

30 Hari

90 Hari

Kustom

 Dari: 10 Sep 2026

 s.d. 09 Okt 2026

Filter: Semua Departemen

Filter: Semua Shift

Pratinjau

Berkas ekspor disimpan di folder reports pada penyimpanan khusus aplikasi (Android/data/com.ratig.app/files/reports) dan langsung dibuka melalui dialog berbagi.

7 Hari 30 Hari 90 Hari Kustom


Filter: Semua Departemen

Pratinjau

ADMIN

The screenshot displays a mobile application interface for managing examination schedules. At the top, the status bar shows the time 18.39, signal strength, Wi-Fi, and battery levels. The app's header features the title 'Jadwal Pemeriksaan' and a 'Kelola Shift' button. Below the header, a navigation bar includes a back arrow, the date 'Jumat, 09 Okt 2026', a forward arrow, and a 'Pilih' button with a calendar icon. The main content area is dark and contains a large calendar icon, the text 'Belum ada jadwal', and a message stating 'Tidak ada jadwal pemeriksaan pada tanggal ini. Tekan tombol + untuk membuat jadwal.' A prominent green button with a white plus sign is located at the bottom right of the screen.

< **Jumat, 09 Okt 2026** >  **Pilih**

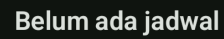

Jadwal Pemeriksaan

Penjadwalan pemeriksaan per tanggal dan pengelolaan shift.

Penjadwalan pemeriksaan per tanggal dan pengelolaan shift.

18.40

Tindak Lanjut

Semua

Terbuka

Selesai



Belum ada tindak lanjut

Tidak ada tindak lanjut yang cocok dengan filter ini.

Tindak Lanjut

Daftar tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan filter status.

18.40

← Log Audit

Semua Aksi

09 Oct 2026 18:14:58
Sistem
profiles · f58cbd2e...

DELETE

09 Oct 2026 18:14:45
Admin RATIG
profiles · f58cbd2e...

create_user

{"role": "user", "source": "admin-create-user", "ac

09 Oct 2026 18:14:45
Sistem
profiles · f58cbd2e...

approve_account

{"changed": "[\"account_status\"]"}

09 Oct 2026 18:14:45
Sistem
profiles · f58cbd2e...

INSERT

09 Oct 2026 17:51:15
Sistem
profiles · 392954d5...

set_role

{"changed": "[\"role\"]"}

09 Oct 2026 17:51:15
Sistem
profiles · c01bb60a...

set_role

{"changed": "[\"role\"]"}


09 Oct 2026 17:51:15
Sistem

set_role

SUPER ADMIN

Audit Log


Jejak audit seluruh tindakan penting (mis. create_user, approve_account).

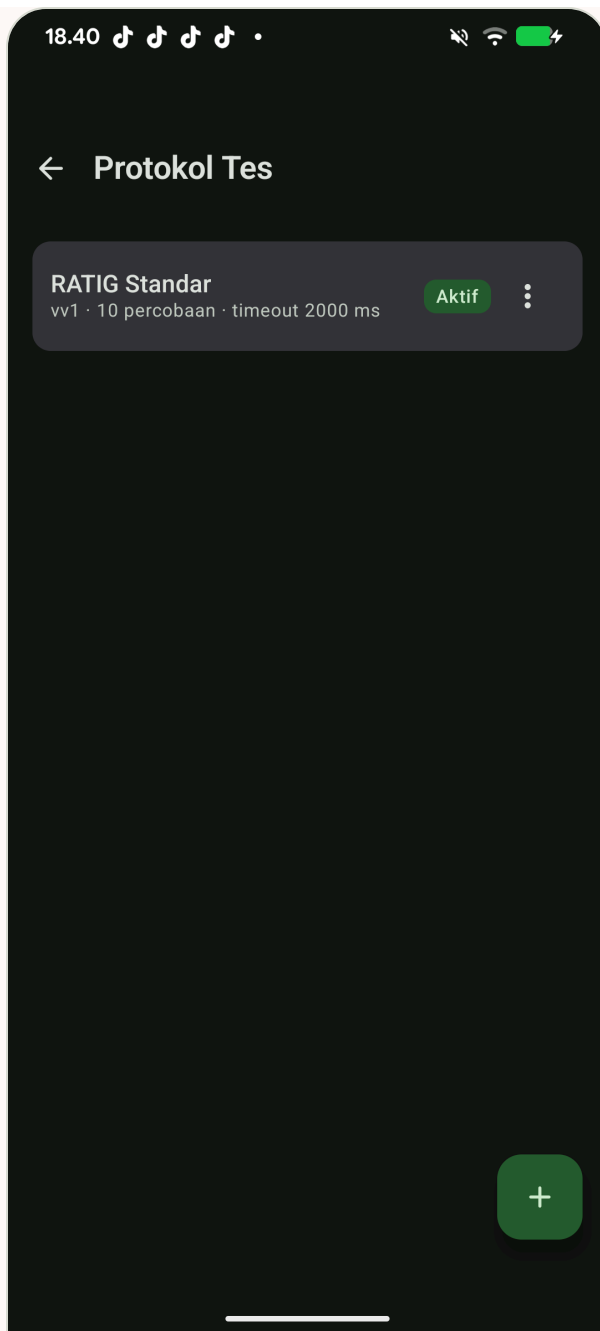

SUPER ADMIN

Protokol Uji

Daftar protokol pemeriksaan beserta versi dan statusnya.

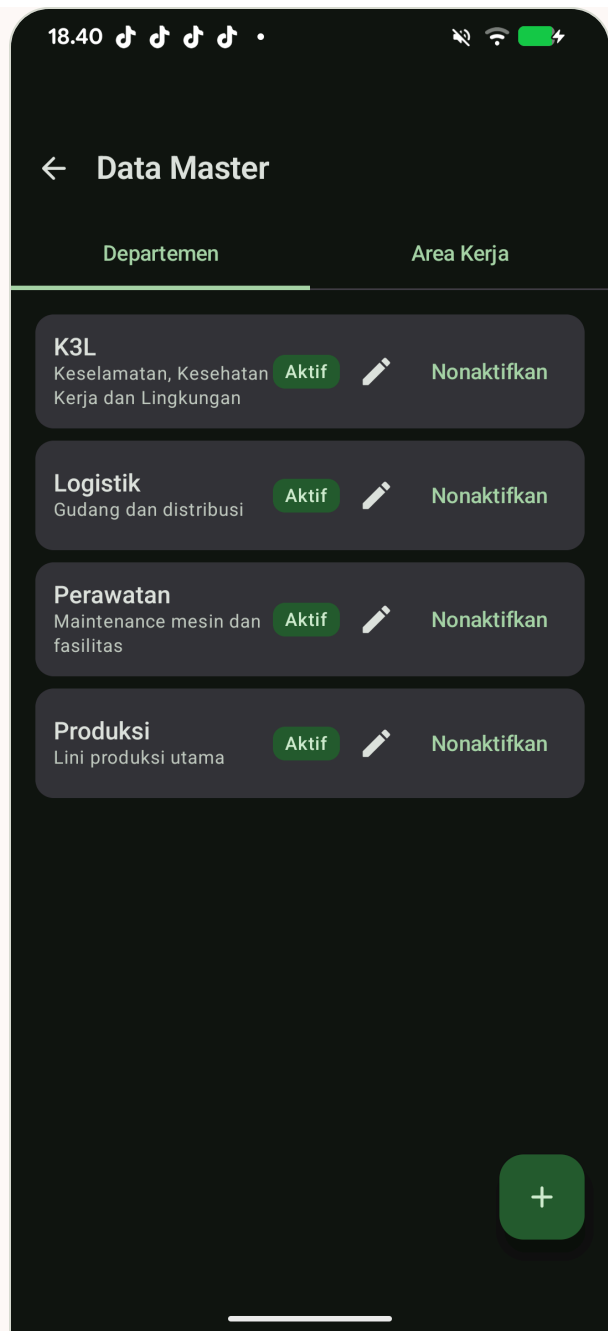

SUPER ADMIN

Data Master

Pengelolaan departemen, area kerja, dan shift.

← Aturan Klasifikasi

Protokol

RATIG Standar (vv1)

Versi aturan

v1

Berlaku dari 09 Oct 2026

Disetujui

+ Aturan Baru



Label kategori masih "Perlu validasi". Label harus divalidasi organisasi sebelum aturan disetujui.

Aturan berstatus Disetujui tidak dapat diubah. Buat versi baru untuk revisi.

Versi aturan


v1

Pita kategori (urut dari reaksi tercepat)


SUPER ADMIN

Aturan Klasifikasi

Ambang batas kategori kelelahan yang dapat divalidasi perusahaan (versi terpisah).

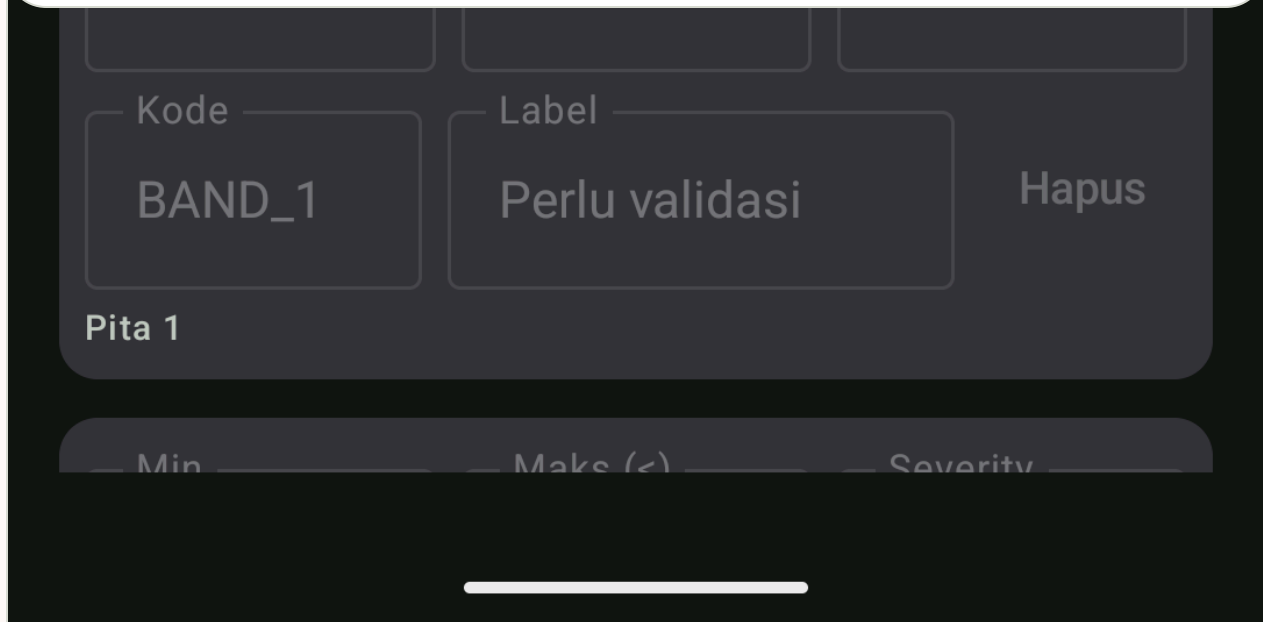


Pengalaman Pengguna (User)

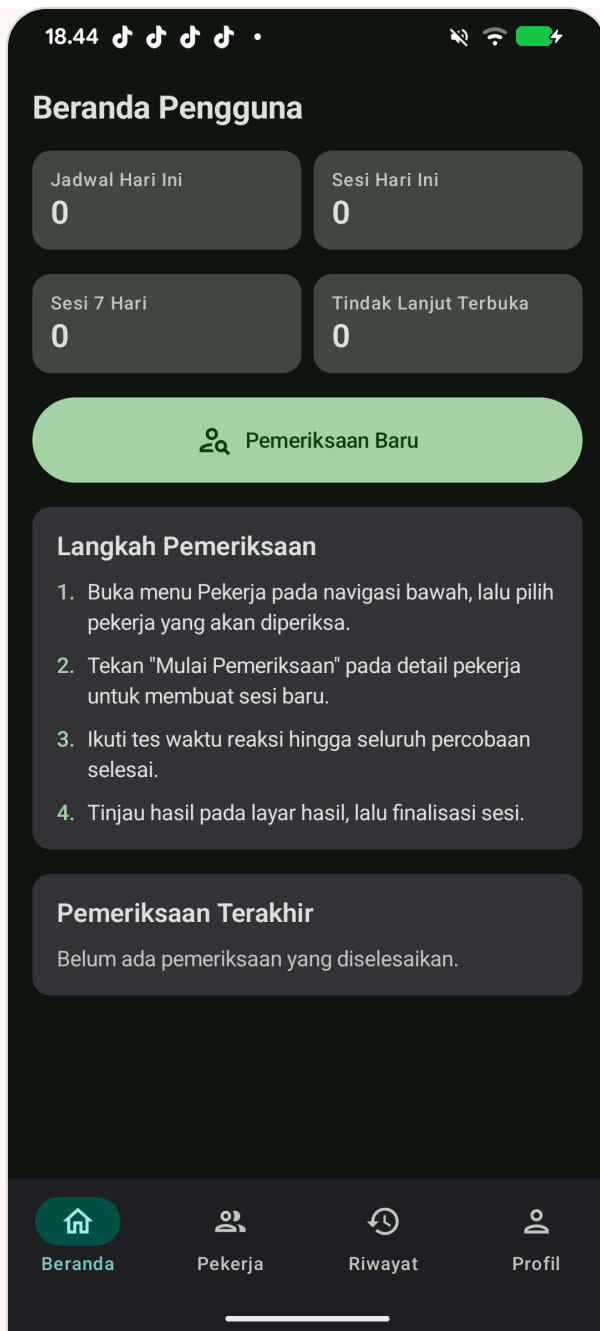

PENGGUNA

Beranda Pengguna

Ringkasan sesi pribadi dan panduan langkah pemeriksaan.

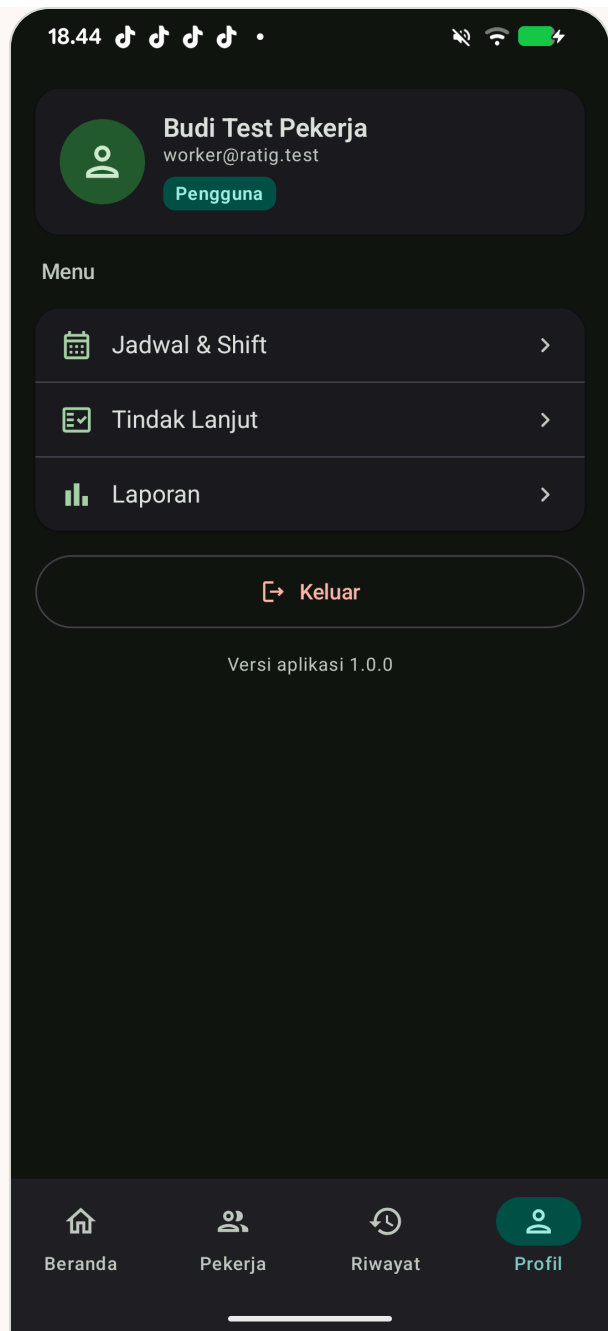

PENGGUNA

Profil Pengguna

Menu lebih ringkas: hanya fungsi yang relevan untuk peran Pengguna.